

erbe
power your performance.



VIO® C

L'unità compatta VIO
per il day surgery chirurgico

VIO® 50 C e VIO® 100 C

La gamma delle applicazioni



*Esempi di applicazione:
Epilazione, varici, coagulazione wet-field, blefaroplastica,
asportazione di lipoma, entropion, cheratoma*

Le unità chirurgiche HF VIO della serie C soddisfano tutte le esigenze della chirurgia specialistica ambulatoriale, a fronte di un rapporto ottimale prezzo-prestazioni, con modalità di taglio monopolare e di coagulazione monopolare e bipolare.



SETTORI D'APPLICAZIONE DELLE UNITÀ VIO C:

- Chirurgia d'urgenza
- Dermatologia
- Oftalmologia
- Chirurgia plastica
- ORL
- Ginecologia

1



8/4 mm, bipolare
N° 20140-610



2 pin-22-28-8/4 mm, bipolare
N° 20140-613

Configurazione individuale secondo le singole esigenze

L'operatore può scegliere liberamente tra un'ampia scelta di prese e memorizzare programmi individuali. La funzione AUTO START (VIO 100 C) assicura inoltre un'estrema praticità e sicurezza d'impiego.



2



3 pin Bovie, monopolare
N° 20140-622



3 pin-9/5 mm, monopolare
N° 20140-623

3



Elettrodo neutro 6 mm
N° 20140-640




Elettrodo neutro 2 pin
N° 20140-641



Elettrodo neutro 6 mm-2 pin
N° 20140-642


Con VIO 50 C e VIO 100 C sono disponibili le seguenti modalità VIO in qualità riproducibile:

AUTO CUT

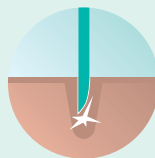

Regolazione automatica della qualità del taglio secondo necessità mediante regolazione della tensione. Il VIO si adegua alla modalità di lavoro del chirurgo. Per una necrosi minima e un'elevata qualità e riproducibilità dell'effetto taglio, ampiamente indipendente dall'elettrodo, dalla procedura e dal tipo di tessuto.

DRY CUT

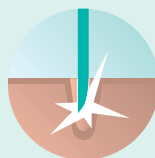


La combinazione di regolazione della tensione e forma di corrente modulata genera un taglio chirurgico HF con marcate caratteristiche di emostasi, a fronte di una minima formazione di fumo. Destinato a interventi che richiedono una buona emostasi primaria.

SOFT COAG



Nuova e rapida modalità di coagulazione soft, assistita dal dosaggio della potenza. Senza carbonizzazione e con rischio minimo di adesione dell'elettrodo al tessuto. Per una coagulazione atraumatica ma profonda.

FORCED COAG

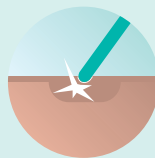

Procedure rapide ed efficaci, indicate per tutte le esigenze di coagulazione standard. Possibilità di esecuzione diretta, utilizzando l'elettrodo di coagulazione, o indiretta, ad es. con una pinzetta chirurgica isolata.

BIPOLEAR SOFT COAG



Coagulazione bipolare. Grazie alla possibilità di scegliere tensioni ridotte, diminuisce notevolmente il rischio di carbonizzazione e di adesione dello strumento ai tessuti.

Dati tecnici

Potenza d'uscita

Potenza CUT max. VIO 100 C	100 Watt a 500 Ohm
Potenza COAG max. VIO 100 C	80 Watt a 100 Ohm
Potenza CUT max. VIO 50 C	50 Watt a 500 Ohm
Potenza COAG max. VIO 50 C	50 Watt a 100 Ohm
Sistema di sicurezza NE	presente

Collegamento alla rete elettrica

Tensione nominale di rete	100 V - 240 V
Frequenza nominale di rete	50 / 60 Hz

Dimensioni e peso

Larghezza x altezza x profondità	280 x 135 x 300 mm
Peso	4 kg

Norme

Classificazione ai sensi della direttiva CE 93/42/CEE	II b
Classe di protezione ai sensi di EN 60 601-1	I
Tipo ai sensi di EN 60 601-1	CF

Codici articoli

VIO 100 C	N° 10140-500
VIO 50 C	N° 10140-550
Interruttore a doppio pedale	N° 20189-107
Interruttore a pedale singolo	N° 20188-102
Calotta di protezione VIO C	N° 20140-500



Erbe Italia S.r.l.
Viale Sarca, 336/f
20126 Milano
Italia
Tel +39 02 6474681
Fax +39 02 64746830
info@erbe-italia.com
erbe-italia.com

Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Germania
Tel +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com